


# ESTRATTORE SOXHLET : CORPO CENTRALE

Cod. 01.0870.38

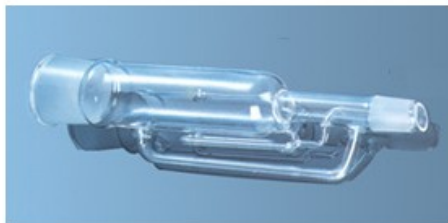

CORPI CENTRALI PER SOXHLET, ML 30, CONO F. 29/32 - CONO MASCHIO NS 29/32

## Descrizione

L'estrattore di Soxhlet viene usato nella determinazione dei grassi liberi e totali negli alimenti, analisi dei pesticidi, dei legni e delle plastiche.

L'estrazione avviene riscaldando il solvente contenuto nel matraccio, dopo che il campione è stato posto nel ditale filtrante nell'interno dell'estrattore.

I vapori sviluppati dal calore salgono lungo il tubo laterale, entrano nel corpo centrale per poi salire nel refrigerante.

Nel refrigerante si condensano e ricadono allo stato liquido nel ditale, riempiendo mano a mano l'estrattore fino al livello del sifone, il quale a sua volta scaricherà il liquido nel matraccio.

Corpo centrale, raccordo conico inferiore NS 29/32

## Dati Tecnici

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Capacità (ml)           | 30    |
| Capacità matraccio (ml) | 50    |
| Cono (NS)               | 29/32 |

## Varianti

| Codice | Prodotto | Capacità (ml) | Capacità matraccio (ml) | Cono (NS) |
|--------|----------|---------------|-------------------------|-----------|
|--------|----------|---------------|-------------------------|-----------|

---

|            |                                       |      |      |       |
|------------|---------------------------------------|------|------|-------|
| 01.0870.38 | ESTRATTORE SOXHLET:<br>CORPO CENTRALE | 30   | 50   | 29/32 |
| 01.0870.51 | CORPO CENTRALE                        | 70   | 100  | 34/35 |
| 01.0870.57 | CORPO CENTRALE                        | 100  | 250  | 45/40 |
| 01.0870.64 | CORPO CENTRALE                        | 150  | 250  | 45/40 |
| 01.0870.69 | CORPO CENTRALE                        | 200  | 500  | 55/45 |
| 01.0870.73 | CORPO CENTRALE                        | 250  | 500  | 55/45 |
| 01.0870.79 | CORPO CENTRALE                        | 500  | 1000 | 60/46 |
| 01.0870.88 | CORPO CENTRALE                        | 1000 | 2000 | 71/51 |

---

**TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE**